




NuVasive™ Helix Mini ACP™

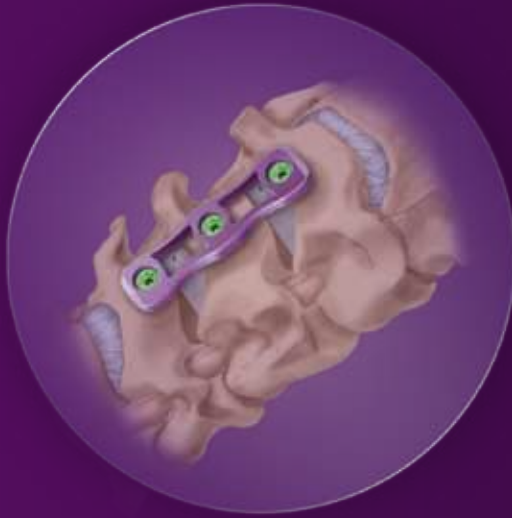

Os esperados recursos premium, agora mais rápidos, menores e mais seguros.

VISÃO GERAL DO SISTEMA NUVASIVE™ HELIX MINI ACP™

NuVasive™ Helix Mini ACP™

- Parafusos Ósseos de Ângulo Variável - e Fixo - para a construção perfeita, dependendo das necessidades do paciente.
- Parafusos Ósseos de ângulo Variável apresentam um cone de 20° de angulação para acomodar as necessidades do cirurgião.
- A Placa NuVasive Helix Mini ACP possui um perfil de 2,4mm para reduzir a chance de desconforto pós-operatório.
- Os tamanhos de placa acomodam Nível 1 e 2 nas necessidades de construção.



DESBLOQUEADO

A Borda do Parafuso Ósseo fica visível, e a cabeça do Parafuso fica frouxa na superfície da Placa.



BLOQUEADO


A borda do Parafuso Ósseo é completamente coberta e a cabeça do Parafuso é fixada abaixo do Bloqueio da Bobina Chanfrada Helix.

Bloqueio de Bobina Chanfrada Espiral (CCL)

- Bloqueio da Bobina Chanfrada Helix bloqueia com consistência e segurança os Parafusos Ósseos na Placa enquanto que ainda permite que a Placa seja bem fixada ao osso para um ajuste firme.
- Parafusos Ósseos podem ser removidos e reposicionados facilmente enquanto mantém a integridade do CCL.
- Parafusos Ósseos Agressivos em um completo complemento de comprimentos e diâmetros acomodam uma variedade de cenários cirúrgicos.

Instrumentação Equilibrada e Intuitiva


- Guias DTS permitem pré-perfurar, rosquear e colocação do Parafuso Ósseo sem alterar o ângulo de inserção.

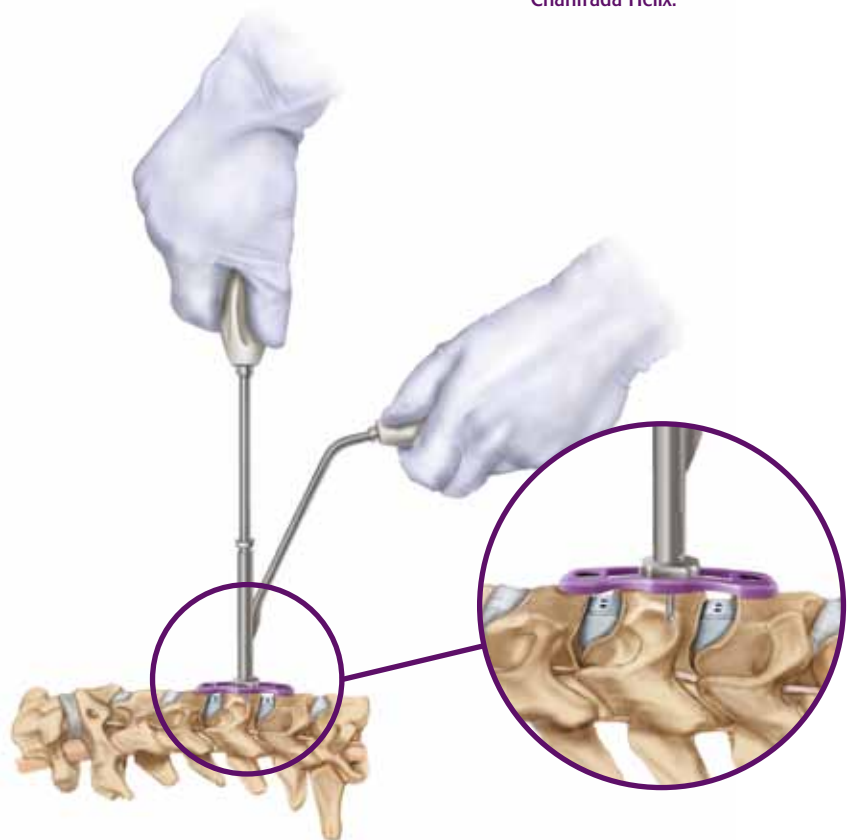

VISÃO GERAL DO SISTEMA NUVASIVE™ HELIX MINI ACP™

Flexão Intraoperatória da Placa Fácil e Precisa

- A placa pode ser dobrada no intra-operatório em qualquer lordose adicional ou em cifose, a fim de acomodar a patologia do paciente.

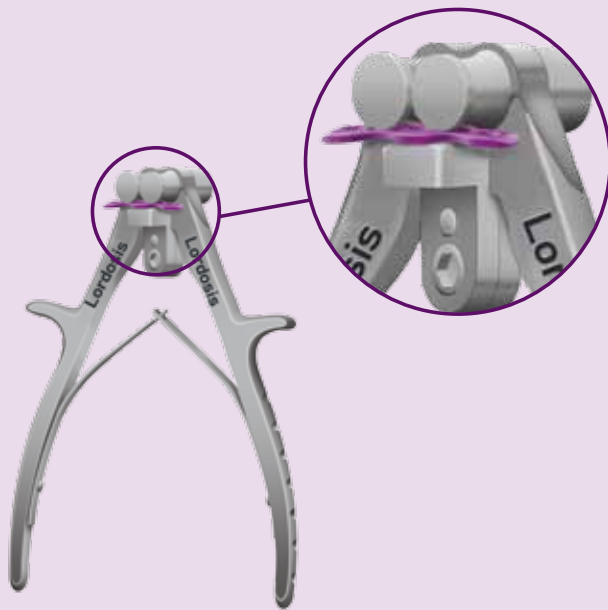


Borda de Condutor de Perfil Baixo

- A Placa fica rente à coluna cervical anterior.
- Diminuído o excesso na borda condutora da Placa para reduzir o desconforto esofágico no pós-operatório.



Placa Estreita Reduz a Retração Durante a Colocação

- Retração reduzida para fácil colocação.
- Menos de 12mm no ponto mais largo.
 - 10mm na cintura.

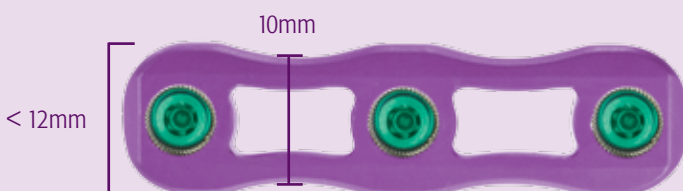

Visualização Intraoperatória

- Grandes portais permitem a verificação da colocação do enxerto.
- A janela única de visualização/alinhamento do enxerto dá uma referência precisa para a colocação reta da linha intermediária.



IMPLANTES E INSTRUMENTOS NUVASIVE™ HELIX MINI ACP™

IMPLANTES	CATÁLOGO #
NuVasive™ Helix Mini ACP,™ 20mm Nível-1	7740120
NuVasive Helix Mini ACP Nível 1, 22mm	7740122
NuVasive Helix Mini ACP, 24mm Nível-1	7740124
NuVasive Helix Mini ACP, 26mm Nível-1	7740126
NuVasive Helix Mini ACP, 28mm Nível-1	7740128
NuVasive Helix Mini ACP Nível 1, 30mm	7740130
NuVasive Helix Mini ACP Nível 1, 32mm	7740132
NuVasive Helix Mini ACP, 34mm Nível-1	7740134
NuVasive Helix Mini ACP, 36mm Nível-2	7740236
NuVasive Helix Mini ACP, 38mm Nível-2	7740238
NuVasive Helix Mini ACP, 40mm Nível-2	7740240
NuVasive Helix Mini ACP Nível 2, 42mm	7740242
NuVasive Helix Mini ACP Nível 2, 44mm	7740244
NuVasive Helix Mini ACP Nível 2, 46mm	7740246
NuVasive Helix Mini ACP Nível 2, 48mm	7740248
NuVasive Helix Mini ACP, 50mm Nível-2	7740250

IMPLANTES	CATÁLOGO #
Condutor de Parafuso Ósseo	7730042
Furador de Guia de Broca	7730062
Perfurador Auto-Centralizados (Variável)	7730063
Furador Auto-Centralizador (FIXO)	7730064
Extrator de Parafuso Ósseo	7730072
Guia de Broca, Ângulo Fixo	7730081
Guia de Broca, Ângulo Variável	7730091
Curvador de Placa	7740701
Bandeja de Esterilização NuVasive Helix Mini ACP	7740001
Guia DTS de Extremidade 7°	7740086
Guia DTS Intermediário 0°	7740088
Suporte de Placa NuVasive Helix Mini ACP	7740043
Cabo Universal	7730600
NuVasive Helix Mini ACP - IFU	9400236
Broca	7730016
Rosca	7730026

IMPLANTES	CATÁLOGO #
Parafusos Ósseos Auto-Perfurantes (Variável, 4.0)	
Parafuso Variável Autoperfurante 4,0 x 11mm	7741111
Parafuso Variável Auto-Perfurante 4,0 x 13mm	7741113
Parafuso Variável Auto-Perfurante 4,0 x 15mm	7741115
Parafusos Ósseos Auto-Perfurantes (Fixo, 4.0)	
Parafuso Fixo Autoperfurante 4,0 x 11mm	7742111
Parafuso Fixo Autoperfurante 4,0 x 13mm	7742113
Parafuso Fixo Autoperfurante 4,0 x 15mm	7742115
Parafuso Ósseo Auto-Roscante (Variável, 4.0)	
Parafuso Variável Auto-roscante 4,0 x 11mm	7748111
Parafuso Variável Auto-roscante 4,0 x 13mm	7748113
Parafuso Variável Auto-Roscante 4,0 x 15mm	7748115
Parafuso Ósseo Auto-Roscante (Fixo, 4.0)	
Parafuso Fixo Auto-Roscante 4,0 x 11mm	7747111
Parafuso Fixo Auto-roscante 4,0 x 13mm	7747113
Parafuso Fixo Auto-roscante 4,0 x 15mm	7747115
Parafusos Ósseos Auto-roscantes (Variáveis, 4,5)	
Parafuso Variável Auto-Roscante 4,5 x 11mm	7735111
Parafuso Variável Auto-Roscante 4,5 x 13mm	7735113
Parafuso Variável Auto-Roscante 4,5 x 15mm	7735115
Parafusos Ósseos Auto-roscantes (Fixos, 4,5)	
Parafuso Fixo Auto-Roscante 4,5 x 11mm	7746111
Parafuso Fixo Auto-Roscante 4,5 x 13mm	7746113
Parafuso Fixo Auto-Roscante 4,5 x 15mm	7746115



Para encomendar, favor entrar em contato com Representante Autorizado de Vendas NuVasive™ ainda hoje em:

NuVasive, Inc. 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 • telefone: 800-475-9131 fax: 800-475-9134

EC REP NuVasive UK Limited 509 Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree WD6 3FG
 telefone: +44 (0) 208-238-7850 fax: +44 (0) 207-998-7818

www.nuvasive.com

9500188805 A